



 borer medical

Le NOUVEAU Borer PCDS Premium -
because quality matters!



Innovation et qualité de la maison Borer

Une installation de qualité et innovante. Ces critères ont constitué le point de départ de la conception et du développement de ce nouveau convoyeur de produits chimiques. D'un côté parce que la qualité au sein de la centrale de stérilisation et du cycle de préparation des instruments¹ est plus importante que jamais. D'un autre côté, parce que le client moderne exige des solutions performantes mais simples.

Fonctions principales

- Préparation en continu et sans interruption des produits chimiques pour les LD (laveurs-désinfecteurs) reliés.
- Simplification et amélioration de la logistique avec l'objectif d'accroître l'efficacité des processus de nettoyage et de désinfection.

Principaux avantages

- Alimentation sans interruption des LD
Les LD reliés sont alimentés en produits chimiques de manière régulière et sans interruption. Ceci évite d'interrompre un cycle de lavage de manière inutile, uniquement parce qu'un bidon est vide.

- Utilisation de gros bidons
Grâce au PCDS, il est possible d'utiliser des bidons de 220 litres par exemple. Il n'est plus nécessaire de perdre du temps à remplacer les petits bidons.
- Alimentation simultanée de plusieurs LD
Le nouveau PCDS peut alimenter en produits chimiques jusqu'à 10 LD, quelle que soit leur localisation.
- Remplacement des bidons sans contact
Grâce au mécanisme de levage, il est inutile de toucher les lances d'aspiration, ce qui simplifie la manipulation et protège les employés

Caractéristiques uniques

- Appel à changer le bidon
Dès qu'un bidon a atteint la hauteur de remplissage (critique) prédéfinie, le système envoie un e-mail. Le système contrôle donc pour vous.
- Serveur web intégré
Les fonctions de l'installation peuvent être surveillés simplement à partir d'un PC externe.



Simplicité et gain de temps

Le nouveau Borer PCDS Premium couvre les besoins des employés de la centrale de stérilisation : l'utilisation simple du système réduit la manutention et aide à économiser du temps et de l'argent. En outre, elle constitue le garant d'un début absolument fiable pour un processus de nettoyage et de désinfection réussi.


Exactement ce qu'il faut pour vous

En tant que manager de la centrale stérilisation, vous êtes responsable d'un processus de nettoyage et de désinfection strict, efficace et sans accroc. Vous veillez également

à la protection des collaborateurs et des patients avec les produits et prestations de service prévus. C'est la raison pour laquelle la qualité est très importante et que le nouveau Borer PCDS Premium est ce qu'il vous faut. Because quality matters!

Nous serons heureux de vous présenter le nouveau Borer PCDS Premium de plus près. Contactez notre partenaire de distribution sur place ou visitez notre site Internet. A l'adresse www.borer.ch/fr/borer-pcgs-premium, vous trouverez d'autres informations à ce sujet.

¹ III. Cycle de préparation des instruments

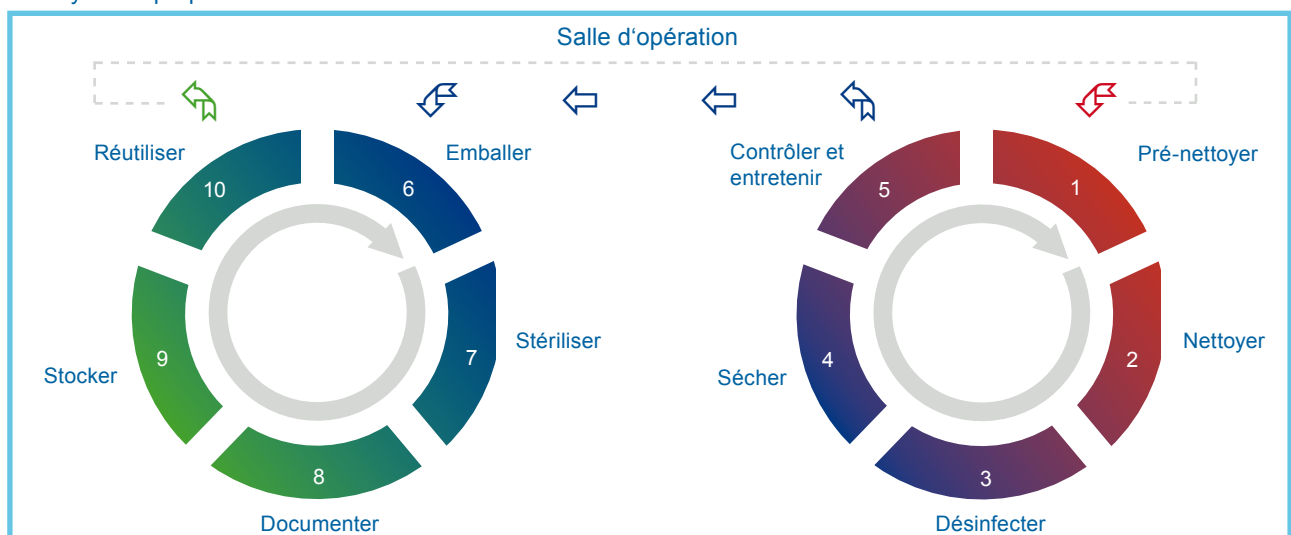

Borer Chemie AG

Gewerbstrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland
Tel. +41 32 686 56 00, Fax +41 32 686 56 90
www.borer.ch, office@borer.ch

deconex®